


Meatal Swab Specimen Collection Guide


Clinician-collection with the cobas® PCR Media Uni or Dual Swab Sample Kit

PROCEDURAL NOTES:

- If using the **cobas®** PCR Media Dual Swab Sample Kit, discard the flocked swab, as it is not needed for this procedure. **Use only the woven swab.**
- Avoid contact of the **cobas®** PCR Media with the skin, eyes or mucous membranes. If contact does occur, immediately wash with large amounts of water.

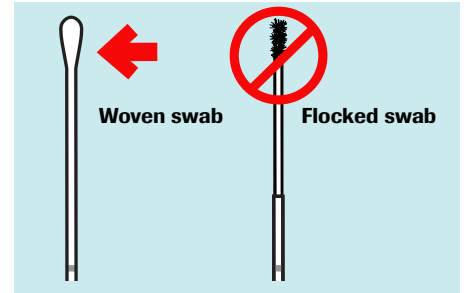


NOTE: Do not pre-wet the swab in **cobas®** PCR Media before collection.

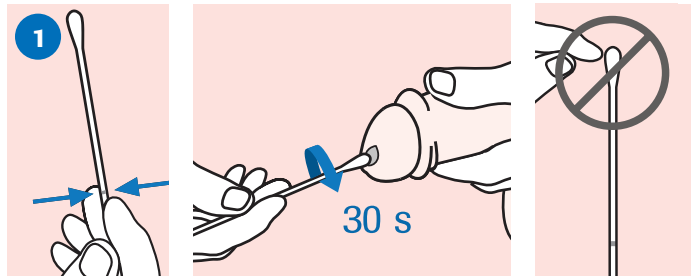


COLLECT:

- To collect the specimen, hold the swab with the scoreline above your hand.
- Turn the swab for about 30 seconds while rubbing the swab around the tip of the penis.
- Move the swab away carefully.
- Do not let the swab touch any other surface before placing it into the collection tube.

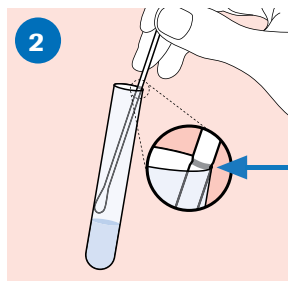


ALIGN:

- Remove the cap from the **cobas®** PCR Media Tube.
- Lower the swab specimen into the tube until the visible scoreline on the swab shaft is aligned with the tube rim.

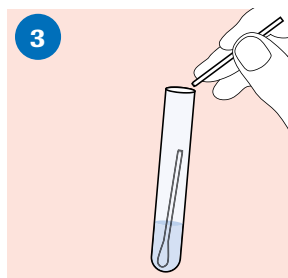

BREAK:

- Carefully leverage the swab against the tube rim to break the swab shaft at the scoreline.

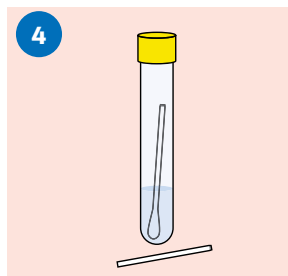

CLOSE:

- Tightly close the **cobas®** PCR Media Tube. The specimen is now ready for transport.
- Discard the top portion of the swab.

SPECIMEN TRANSPORT AND STORAGE:

- Transport and store the **cobas®** PCR Media Tube containing the collection swab at 2°C to 30°C.
- The specimen should only contain 1 woven swab and may be rejected if the tube contains no swab or 2 swabs.

Guía de recolección de muestras con hisopo meatal


Recolección clínica con el kit de muestra de uno o dos hisopos de medio cobas® para PCR

NOTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

- Si se utiliza el kit de muestra de dos hisopos de medio **cobas**® para PCR, deseche el hisopo flocado, ya que no es necesario para este procedimiento. **Utilice el hisopo tejido.**
- Evite el contacto del medio **cobas**® para PCR con la piel, los ojos o las membranas mucosas. Si se produce el contacto, enjuague de inmediato con abundante agua.




NOTA: **No** humedezca previamente el hisopo con el medio **cobas**® para PCR antes de la recolección.

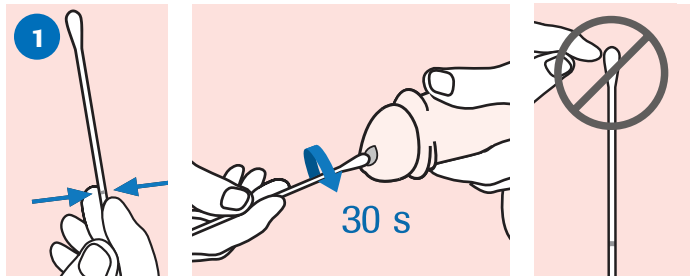


RECOGER:

- Para recoger la muestra, sostenga el hisopo con la línea ranurada por encima de la mano.
- Gire el hisopo durante aproximadamente 30 segundos mientras frota el alrededor de la punta del pene.
- Aleje con cuidado el hisopo.
- No permita que el hisopo toque ninguna otra superficie antes de colocarlo en el tubo de recolección.

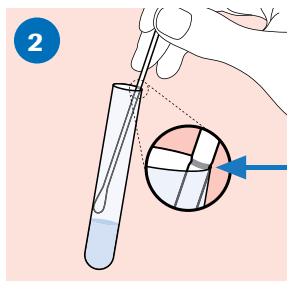


ALINEAR:

- Quite la tapa del tubo de medio **cobas**® para PCR.
- Baje la muestra con hisopo hacia el tubo hasta que la línea ranurada visible del mango del hisopo quede alineada con el borde del tubo.

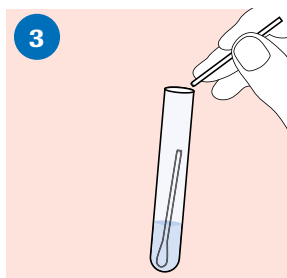

ROMPER:

- Con cuidado, presione el hisopo contra el borde del tubo para romper el mango del hisopo por la línea ranurada.

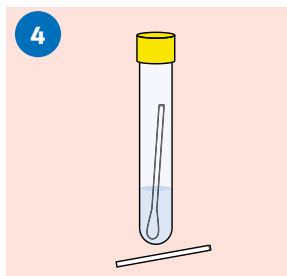

CERRAR:

- Cierre correctamente el tubo de medio **cobas**® para PCR. La muestra está lista para su transporte.
- Deseche la parte superior del hisopo.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA:

- Transporte y almacene el tubo de medio **cobas**® para PCR que contiene el hisopo de recolección a una temperatura entre 2 °C y 30 °C.
- La muestra solo debe contener 1 hisopo tejido, y es posible que se la rechaza si el tubo no contiene ningún hisopo o 2 hisopos.